

SHAPE DIMENSION



DGSHAPE

Зубопротезный набор для небольших кейсов

CA-DK1

Совместимые зубопротезные фрезерные станки
DWX-53DC
52DCi / 52DC / 52D

Более маленькая силиконовая форма сокращает время фрезерования и затраты на материалы.



Силиконовая форма
× 6



Крепление ×
50 комплектов



Силиконовая пластина
× 3




Оснастка для
крепления в станке
× 3



Фреза
ZRB-150D

Выбирайте один из двух типов создания протезов

Процесс	Необходимо
Процесс изготовления базиса зубного протеза	CA-DK1
Процесс изготовления съемного протеза	CA-DK1 CA-DK1-TR лотка × 10

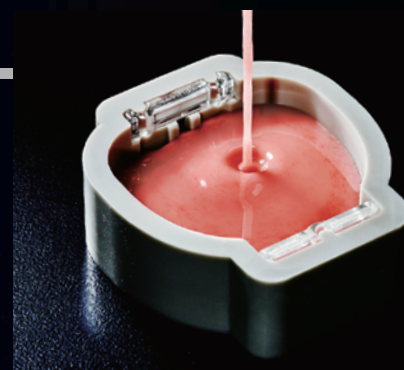

Сравнение размеров CA-DK1 и CA-DK2



Используйте QR-код для доступа к руководствам и видео, в которых подробно рассказывается о рабочем процессе.



поддержка

DGSHAPE Webinar SHAPE THE DIGITAL DENTURES



Посмотреть
(бесплатно)

Совместимость с системами CAD/CAM

	CAD	CAM
DK2-53 / CA-DK2 / CA-DK1	- Full Denture Design Module / 3Shape - Full Denture Module / exocad	- MillBox / CIMsystem - DGSHAPE Dental CAM

ОБЕЩАНИЕ БРЕНДА DGSHAPE

Корпорация DGSHAPE является дочерней компанией Roland DG Corporation, созданной в 2017 году с целью разработки и продвижения на рынок инновационных технологий производства технологий по всему миру. Имея 30-летний опыт в инновационном 3D-проектировании, основная миссия DGSHAPE - "создавать инновации, делать жизнь лучше" - сосредоточена на предоставлении цифровых технологий, которые воплощают идеи в жизнь, революционизируют бизнес-процессы и формируют лучшее будущее.



DGS0056A '22DEC Z-0 AD-S

DIGITAL DENTURE SOLUTION

Комплект
для изготовления съемных протезов
для сухих станов серии DWX



DIGITAL DENTURE SOLUTION

Сделайте улыбки для всех

Комплект для фрезерования съемных протезов DGS SHAPE позволяет вам делать индивидуальные съемные протезы из акрила горячего или холодного отверждения. Прессованные, фрезеруемые и отпечатанные зубы устанавливаются за считанные минуты, поскольку зубные карманы фрезеруются в основании протеза, чтобы обеспечить удобство посадки. Продвиньте процесс еще на шаг вперед, используя лоток для прессованных зубов, и изготовьте эстетичный полный съемный протез менее чем за четыре часа. Наряду с возможностью выбора рабочих процессов использования комплекта зубных протезов снижает производственные затраты и сокращает время выполнения работ, обеспечивая при этом высокое качество продукции, что делает его идеальным решением для цифровых протезов.



Простая постановка зубов

Легко помещайте прессованные, фрезерованные или печатные зубы в отфрезерованные карманы.

Доступное эстетическое решение

Полностью создавайте эстетически привлекательные протезы на заказ собственными средствами и экономьте деньги сейчас.

Сокращенное время выполнения заказа

Используйте этот цифровой рабочий процесс и вложите сэкономленное время в ваш бизнес.

Совместимость с термическим отверждением

Вы можете использовать акрил горячего или холодного отверждения с вашим комплектом зубных протезов.

Открытое решение

Набор протезов совместим с новейшим программным обеспечением CAD, включая Dental System 3Shape и exocad.

Оригинальные инструменты DGS SHAPE обеспечивают оптимальную производительность, сокращают время фрезерования и обеспечивают высокое качество результатов.

Совместимо только с DWX-53DC ZRB-200D ZRB-150D ZPB-100D ZPB-50D ZPB-30D

Комплект для изготовления съемных протезов для сухих станков серии DWX

CA-DK2

Совместимые зубопротезные фрезерные станки

DWX-52DCi / 52DC / 52D



CA-DK2-FX × 15°



CA-DK2-TR × 15°



Силиконовая подставка × 2



Фрезы
• ZRB-150D
• ZPB-100D/50D/30D

*Расходные материалы можно приобрести отдельно для работы.



DK2-53

Совместимые зубопротезные фрезерные станки

DWX-53DC



DK2-53-FX × 15°



DK2-53-TR × 15°



Силиконовая подставка × 2



Фрезы
• ZRB-200D
• ZPB-100D/50D/30D

*Расходные материалы можно приобрести отдельно для работы.



Выбирайте один из двух типов создания протезов

Процесс изготовления базиса зубного протеза

Оптимизированная форма лотка и инструмент для черновой обработки 3 мм или 4 мм сокращают затраты на материалы и время фрезерования. Можно использовать временное соединение, фиксирующее прессованные зубы для пробной примерки.



Время ручной работы: 50 минут
Время фрезерования: 2 часа 15 минут*

*Время фрезерования зависит от размера протеза и модели станка DWX.



*Рабочий процесс с акрилом горячего отверждения имеет отличия.

Используйте QR-код для просмотра руководства и видео, в которых подробно рассказывается о рабочем процессе.



поддержка

Процесс изготовления съемного протеза

Легко устанавливайте зубы после фрезерования карманов в лотке перед полимеризацией. Затем завершайте рабочий процесс, изготавливая полностью готовый зубной протез. Полученное соединение является чрезвычайно прочным и дает более естественный вид продукта.




Время ручной работы: 25 минут
Время фрезерования: 3 часа 15 минут*

*Время фрезерования включает фрезерование карманов.
*Время фрезерования зависит от размера протеза и модели станка DWX.



*Рабочий процесс с акрилом горячего отверждения имеет отличия.

Используйте QR-код для просмотра руководства и видео, в которых подробно рассказывается о рабочем процессе.

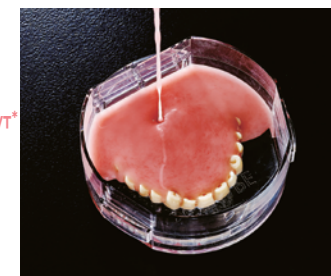

поддержка